

# Spinova® Mum

Die innovative Schwangerschaftsorthese, deren einzigartiges Gurtsystem den Rücken entlastet und gleichzeitig das Becken stabilisiert.



NEU



Produktinformationen schnell digital verfügbar mit der Bauerfeind Hilfsmittel-App [bauerfeind.de/himi-app](https://bauerfeind.de/himi-app)

## ZWECKBESTIMMUNG

Spinova Mum ist ein Medizinprodukt. Sie ist eine Orthese zur Entlastung der LWS und Stabilisierung von ISG während und nach der Schwangerschaft (Rückbildung).

## HILFSMITTELNUMMER

beantragt für 23.14.02.0

## HINWEISE ZUR REZEPTIERUNG

Um Sicherheit bei der Kostenerstattung zu erhalten und eine Abgrenzung zu anderen HMV-Gruppen zu schaffen, sind daher folgende Angaben auf dem Rezept wichtig:

- namentliche Verordnung Spinova Mum mit Begründung **oder**
- korrekte Angabe des 7-Stellers **oder**
- abrüstbare Rückenorthese mit Zusatzelementen zur Entlordosierung und Stabilisierung **und**
- Angabe der Indikation, z. B. LWS-Syndrom durch Hyperlordose.

Herkömmliche Schwangerschaftsorthesen sind eingruppiert in: PG 23.14.03.1 – Stabilisierungsothesen mit Zugelementen (analog LordoLoc)

## INDIKATIONEN\*

Lendenwirbelsäulen-Indikationen:

- + Schmerzzustände und Instabilitäten im Becken- / Lendenwirbelsäulen-Bereich
- + Lumbalgien
- + radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom
- + akute oder chronische Lumboischialgie
- + mittelgradige lumbale Deformität (Hyperlordose, Spondylolisthese, Skoliose)
- + Zustand nach BS-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps
- + Entzündungen
- + Degeneration

Andere Indikationen:

- + Symphysenlockerung
- + Symphysensprengung
- + ISG-Schmerzen
- + Erkrankungen der Iliosakralgelenke (ISG-Syndrom, ISG-Arthrose, ISG-Instabilität)
- + ISG-Blockierung (akut und prophylaktisch)

## DREIFACHWIRKUNG BEI BECKEN- UND RÜCKENBESCHWERDEN



### 1. Entlordosierung der Lendenwirbelsäule (LWS)

- Zuggurte und Korsettstäbe bilden ein Dreipunktprinzip gegen das Hohlkreuz



### 2. Stabilisierung des Beckens

- Beckenumfassende Gurtung mit Pelotten stabilisiert die ISG und entlastet die Symphyse
- Beckenrückkipfung verstärkt die Entlordosierung



### 3. Entlastende Bauchhebung

- Flexibler Gurt hebt den Bauch an und trägt zur Entlastung des Rückens (der Rückenmuskulatur) bei
- Bewahrt Bewegungsfreiheit von Kind und Mutter




\* Eine vollständige Übersicht aller Indikationen, Kontra-Indikationen und wichtige ergänzende Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

### Was ist besonders an Spinova Mum?

Bisherige (Schwangerschafts-)Orthesen bieten hauptsächlich Bauchunterstützung und Stabilität. Zusätzlich dazu kann Spinova Mum durch ihre integrierten dorsalen Stäbe, abrüstbaren Pelotten und das individuell einstellbare Zuggurtsystem entlordosierend auf die LWS wirken und das Becken stabilisieren. Diese Funktionen zielen darauf ab, dem häufig bei Schwangeren auftretenden Hohlkreuz entgegenzuwirken und zusätzlich die Iliosakralgelenke und Symphyse zu stabilisieren.

### Warum ist es eine abrüstbare Orthese?

Da der Verlauf von Beschwerden während der Schwangerschaft individuell und schnell veränderlich ist, ist eine Orthese mit Abrüstmöglichkeit sinnvoll. Spinova Mum bietet abrüstbare Elemente: die ISG-Pelotten. Zusätzlich ermöglicht das Zuggurtsystem eine individuelle Anpassung.

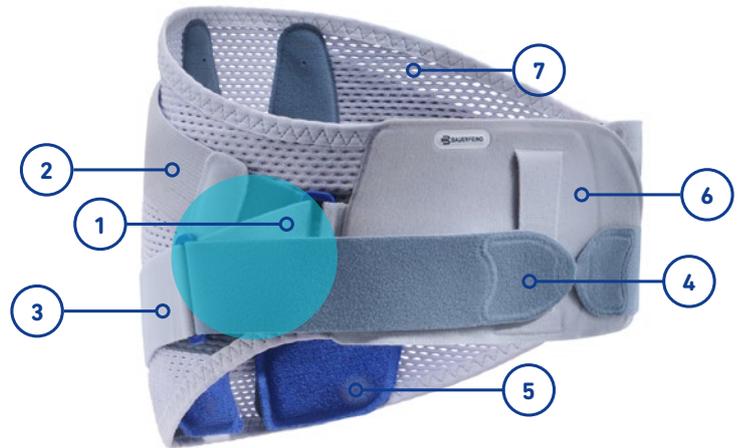

- ① geringer Kraftaufwand durch einzigartiges Zuggurtsystem mit hoher Krafteinleitung
- ② hebt den Bauch angenehm an ohne Druckspitzen in der Bewegung aufgrund des flexiblen Gurtes
- ③ effektive Entlastung der Iliosakralgelenke (ISG) und der Symphyse über zugfesten Gurt für die Beckenringkompression
- ④ einfaches Einstellen der direkt spürbaren Dreifachwirkung für Rücken, Bauch und Becken mit dem Zuggurtsystem
- ⑤ zusätzliche Stabilisierung und Lockerung von Verspannungen bieten die abrüstbaren viskoelastischen ISG-Pelotten
- ⑥ komfortable Passform – der weiche, anschmiegsame Bauchverschluss hat für wachsende Umfänge einen großen Klettbereich und praktische Griffflaschen zum Anlegen
- ⑦ hoher Tragekomfort ohne Hitzestau im elastischen und atmungsaktiven Netzmaterial der Orthese

## DAS BAUERFEIND PLUS FÜR IHR SANITÄTSHAUS

- + innovative Schwangerschaftsorthese, deren einzigartiges Gurtsystem den Rücken entlastet und gleichzeitig das Becken stabilisiert
- + sofortige Linderung der Beschwerden
- + einfache Handhabung
- + Begleitung mit der Bauerfeind Therapie-App
- + digital vermessbar



## BESTELLOPTIONEN

**Ausführung:** Standard

**Farbe:** titan


Größe	1	2	3	4
Umfang Becken (cm)	80–90	90–100	100–115	115–130

Versorgungsumfang: 80–130 cm

### Artikel-Nr.

122 8579 1000 00°

° = Größe (1–4)

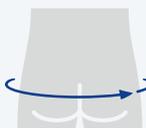

## WEITERE ANGABEN

**Verpackung:** 269 × 59 × 268 mm

**Gesamtgewicht:** Gr. 1 = 374 g

Gr. 2 = 414 g

Gr. 3 = 434 g

Gr. 4 = 454 g

## LIEFERUMFANG

Schwangerschaftsorthese inkl. ISG-Pelotten

Produktkatalogseite, Preisblatt, Folder und weitere Informationen\* finden Sie unter [experts.bauerfeind.com/spinova-mum](https://experts.bauerfeind.com/spinova-mum)



\* Vollständige Produktinformationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

**Haftungshinweise** Alle Angaben dieser Broschüre haben den Stand des Zeitpunkts der Drucklegung. Sämtliche Inhalte dieser Broschüre / Online-Darstellungen (Texte, Bilder, Grafiken etc.) verstehen sich allein als Ergänzung des Rates Ihres professionellen medizinischen Fachpersonals, insbesondere des behandelnden Arztes oder Physiotherapeuten. Die Broschüre soll diesen medizinischen Rat nicht ersetzen. Es wird strengstens empfohlen, vor Einsatz eines Bauerfeind-Produkts oder Übernahme einer Therapieempfehlung ärztlichen Rat einzuholen und von den ärztlich gegebenen Anweisungen / Therapien nicht abzuweichen. Nur dann ist die bestmögliche Wirkung unserer Produkte sichergestellt und Sie werden schnell wieder gesund. Unsere Ausführungen sollen Selbstdiagnose oder Selbstmedikation nicht unterstützen oder fördern, sondern dienen lediglich der allgemeinen Erst-Information und Grundsensibilisierung für die angesprochenen Themen.